

# KN95防护口罩



2片/袋

产品资料

四川制药制剂有限公司

[www.sczyzj.com](http://www.sczyzj.com)



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9151010077457202W



扫描二维码  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

名称 四川制药制药有限公司

类型 其他有限责任公司

法定代表人 沈山

经营范围 生产、销售粉针剂（青霉素类、头孢菌素类），冻干粉针剂、硬胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类），片剂（含青霉素类、头孢菌素类），原料药（依折麦布、盐酸决奈达隆、依达拉奉），干混悬剂，生产、销售保健品；销售化工原料、包装材料；医疗器械生产；第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；生产、销售劳保用品、消毒用品、医用防护用品、卫生用品、服装、鞋帽、手套；医药产品研发项目、投资及项目咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；货物进出口、技术进出口；货物仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 捌仟万元整

成立日期 2005年07月14日

营业期限 2005年07月14日至 2035年07月13日

住所 成都市高新西区百叶路18号

登记机关

2020

年4月27日





Fiscal Year 2020

## CERTIFICATION OF REGISTRATION

This certifies that:

Name: Sichuan Pharmaceutical. Inc

Add: No. 18 Baiye Road, Hi-Tech West Zone, Chengdu, Sichuan Province, China

has completed the FDA Establishment Registration (as manufacturer and foreign exporter) and Device Listing with the US Food & Drug Administration, through

The Owner/ Operator Number for this Registration is: 10069249

Listing No	Code	Premarket Submission NO.	Device Name
D390202	QKR	Enforcement	Disposable Medical face Mask, Disposable Mask, Disposable Protective Mask
D390204	LYU	/	Medical Surgical Mask

ABmed will confirm that such registration remains effective upon request and presentation of this certificate until the end of the year stated above, unless said registration is terminated after issuance of this certificate. ABmed makes no other representations or warranties, nor does this certificate make any representations or warranties to any person or entity other than the named certificate holder, for whose sole benefit it is issued. This certificate does not denote endorsement or approval of the certificate - holder's device or establishment by the U.S Food and Drug Administration.

ABmed assumes no liability to any person or entity in connection with foregoing.

Date of verification: Apr. 12, 2020

Date of expiration: Dec. 31, 2020

SH OFFICE

TEL:0086-21-50313932 Boyle Wang Phone:0086-18930777676 info@truthful.com.cn

ABMED SERVICE INC.

36 South 18th Avenue, Suite A Brighton USA 80601

TEL:213-375-3998 FAX:213-375-3998 info@abmed.com.cn

# 检验检测报告

(电子版)

扫码下载报告



No:200070078

 防伪查询网址: [www.gttc.net.cn](http://www.gttc.net.cn)

防伪码: JCJI-2457-44

共4页 第1页



委托单位	四川制药制剂有限公司 地址: 成都市高新西区百叶路18号		
客户认定信息	KN95防护口罩 50个 批号款号: D20200401 颜色: 白色 材质: 非织造布 熔喷布 亲水无纺布 号型规格: 230×150mm		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-04-08
		报告签发日期	2020-04-26
判定依据	GB 2626-2006 《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》		
综合检验结论	---		
检验检测结果	检验检测项目	判定依据	判定
	NaCl颗粒物过滤效率	GB 2626-2006	符合
	吸气阻力	GB 2626-2006	符合
	呼气阻力	GB 2626-2006	符合
	可燃性	GB 2626-2006	符合
	头带	GB 2626-2006	符合
备注	本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。 复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。		


 签发: 郭子山 高级工程师 **郭子山**

## 样品图片

(电子版)

No:200070078

共4页 第2页



# 样品图片

(电子版)

No:200070078

共4页 第3页



## 检验检测报告附页 (电子版)

No: 200070078

共4页 第4页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●NaCl颗粒物过滤效率 (%)	GB 2626-2006 6.3 空气流量:85L/min 气溶胶颗粒:NaCl 气溶胶浓度:15mg/m <sup>3</sup> 温度:24.8℃ 湿度:36.9%	过滤效率(%): ≥95.0 (KN95)	过滤效率(%): 未处理样品 1# 99.715 2# 99.780 3# 99.715 4# 99.681 5# 99.578 6# 99.675 7# 99.725 8# 99.637 9# 99.717 10# 99.720 温湿度预处理后样品 1# 99.322 2# 99.327 3# 99.375 4# 99.410 5# 99.291	符合	
●吸气阻力(Pa)	GB 2626-2006 6.5 头模: 中号	≤350	未处理样品: 1# 106.1 2# 100.3 预处理样品: 1# 88.6 2# 89.5	符合	
●呼气阻力(Pa)	GB 2626-2006 6.6 头模: 中号	≤250	未处理样品: 1# 70.7 2# 68.4 预处理样品: 1# 74.2 2# 76.8	符合	
●可燃性(s)	GB 2626-2006 6.15	续燃时间 ≤5	续燃时间 未处理样品 1# 0.0 2# 0.0 温湿度预处理后样品 3# 0.0 4# 0.0	符合	
●头带	GB 2626-2006 6.11	面罩的每条头带、带扣及其他调节部件在承受10N的拉力, 持续10s, 不应出现滑脱或断裂。	未处理样品: 1# 符合要求 温湿度预处理后样品: 1# 符合要求	符合	
备注	(本栏空白)				



——本报告结束——

# TEST REPORT

(Electronic version)



No:200074308

VERIFICATION WEBSITE: [www.gttc.net.cn](http://www.gttc.net.cn)

VERIFICATION CODE: KDWE-2364-44

ISSUE DATE:2020-04-26

扫码下载报告



APPLICANT: SICHUAN PHARMACEUTICAL. INC  
ADDRESS: SICHUAN PHARMACEUTICAL. INC NO. 18 BAIYE ROAD, HI-TECH WEST ZONE, CHENGDU,  
SICHUAN PROVINCE, CHINA.

INFORMATION CONFIRMED BY APPLICANT:

KN95 PROTECTIVE RESPIRATOR

QUANTITY: FIFTY PIECES

STYLE NO. : D20200401

MATERIAL: NON-WOVEN FABRIC, MELT-BLOWN NONWOVEN FABRIC,

HYDROPHILIC NON-WOVEN FABRIC

SIZE: 230×150mm

DATE RECEIVED/DATE TEST STARTED: 2020-04-13

CONCLUSION:

FILTRATION EFFICIENCY TO NaCl PARTICULATE MATTER	M
INSPIRATORY RESISTANCE	M
EXPIRATORY RESISTANCE	M
FLAMMABILITY	M
HEAD BAND	M

NOTE: "M" -MEET THE STANDARD'S REQUIREMENT "F" -FAIL TO MEET THE STANDARD'S REQUIREMENT  
"---" -NO COMMENT

REMARK:

THIS REPORT IS THE ENGLISH TRANSLATION VERSION OF THE REPORT 200070078.

ALL THE TESTED ITEMS ARE TESTED UNDER THE STANDARD CONDITION (EXCEPT FOR INDICATION).

COPIES OF THE REPORT ARE VALID ONLY RE-STAMPED.

THE EXPERIMENT WAS CARRIED OUT AT No.1, ZHUJIANG ROAD, PANYU DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG, P. R. CHINA.

APPROVED BY:

ZiShan Guo SENIOR ENGINEER

郭子山



PAGE 1 OF 5



# TEST REPORT

(Electronic version)

No:200074308



# TEST REPORT

(Electronic version)

No:200074308



# TEST REPORT

(Electronic version)

No:200074308

## FILTRATION EFFICIENCY TO NaCl PARTICULATE MATTER

(GB 2626-2006 6.3, AIR FLOW:85L/min, AEROSOL:NaCl, AEROSOL CONCENTRATION, 15mg/m<sup>3</sup>, TEMP:24.8℃ RH:36.9%)

### FILTRATION EFFICIENCY(%) :

#### UNTREATED SAMPLE

1# 99.715  
2# 99.780  
3# 99.715  
4# 99.681  
5# 99.578  
6# 99.675  
7# 99.725  
8# 99.637  
9# 99.717  
10# 99.720

#### CONDITIONING TREATED

1# 99.322  
2# 99.327  
3# 99.375  
4# 99.410  
5# 99.291

### REQUIREMENT

#### FILTRATION EFFICIENCY(%) :

≥95.0  
(KN95)  
(GB 2626-2006)

## INSPIRATORY RESISTANCE(Pa)

(GB 2626-2006 6.5, HEAD SIZE: MEDIUM)

### UNTREATED SAMPLE:

1# 106.1  
2# 100.3

### PRETREATMENT SAMPLE:

1# 88.6  
2# 89.5

### REQUIREMENT

≤350  
(GB 2626-2006)

## EXPIRATORY RESISTANCE(Pa)

(GB 2626-2006 6.6, HEAD SIZE: MEDIUM)

### UNTREATED SAMPLE:

1# 70.7  
2# 68.4

### PRETREATMENT SAMPLE:

1# 74.2  
2# 76.8

### REQUIREMENT

≤250  
(GB 2626-2006)

## FLAMMABILITY(s)

(GB 2626-2006 6.15)

### AFTERFLAME TIME

#### UNTREATED SAMPLE

1# 0.0  
2# 0.0

#### CONDITIONING TREATED

3# 0.0  
4# 0.0

### REQUIREMENT

AFTERFLAME TIME  
≤5  
(GB 2626-2006)



PAGE 4 OF 5

# TEST REPORT

(Electronic version)

No:200074308

---

## HEAD BAND

(GB 2626-2006 6.11)

UNTREATED SAMPLE:

1# PASS

CONDITIONING TREATED:

1# PASS

## REQUIREMENT

EACH HEAD BAND, BUCKLE AND OTHER ADJUST  
PARTS OF MASK SHOULD NOT SLIP OR BREAK  
UNDER 10N TENSION FOR 10S.  
(GB 2626-2006)

---




——End of Report——

PAGE 5 OF 5

# 【装箱单信息】



## 【外包装信息】

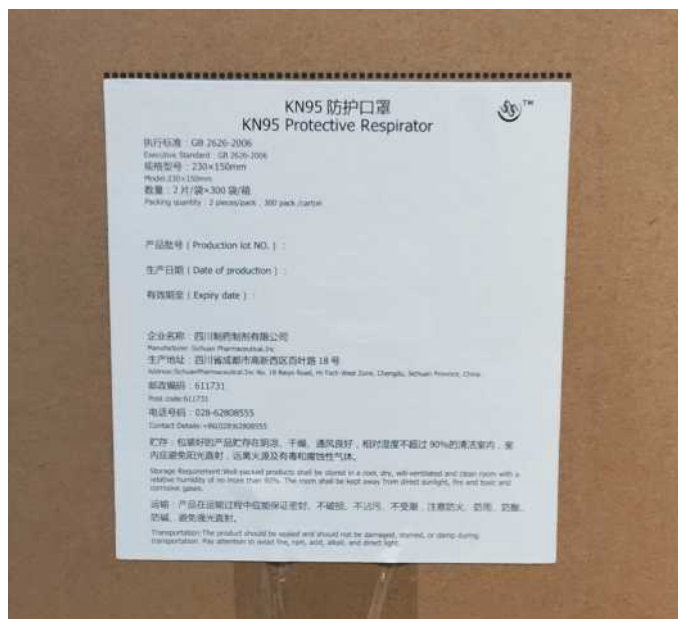

## 【外包装尺寸】



**500mmx438mmx385mm**

## 【包装箱重量】

**含箱体重量: 6公斤**

# 【产品说明】

【产品名称】KN95防护口罩

【型号规格】230×150mm

【主要材料】非纺织布、熔喷布、亲水无纺布

【结构及组成】本产品由口罩体、鼻夹、口罩带组成。口罩体采用四层工艺，外层、内层采用非纺织布和亲水无纺布材料，中间过滤层采用超细聚丙烯纤维熔喷布和熔喷棉；鼻夹为可塑性材料，耳带为弹性松紧材料，口罩为折叠式。

【执行标准】GB 2626-2006

【适用范围】用于普通人群的日常防护，阻菌、防尘、防花粉过敏、防汽车尾气、防霾、防异味、防PM2.5。

【使用说明】

- 1.从包装中取出折叠好的口罩。
- 2.将口罩打开，鼻夹应朝上。
- 3.双手各持一侧耳带，使口罩固定在面部以护住口鼻部。
- 4.用手按压鼻夹，使其适应鼻梁的高度和形状。
- 5.检查面部与口罩边缘的贴合度。

【注意事项】

- 1.在使用过程中如感到不适，应立刻停止使用。
- 2.本品不适用于极端气候、缺氧环境、水下作业、逃生、消防、工业等特殊行业工种。
- 3.无纺布过敏者禁止使用。
- 4.如有破损，请勿使用。
- 5.产品不可洗涤。日常使用脏污后应停止使用。

【包装数量】2片/袋。

【贮存】包装好的产品贮存在阴凉、干燥、通风良好，相对湿度不超过90%的清洁室内，室内应避免阳光直射，远离火源及有毒和腐蚀性气体。

【运输】产品在运输过程中应能保证密封、不破损、不沾污、不受潮，注意防火、防雨、防酸、防碱、避免强光直射。

【使用期限】2年（仅限未拆封）。

【生产日期】见外包装。

【生产企业名称】四川制药制剂有限公司

【住所】四川省成都市高新西区百叶路18号

【生产地址】四川省成都市高新西区百叶路18号

【邮政编码】611731

【联系方式】028-62808555

【网址】<http://www.sczyzj.com>

【售后服务单位】四川制药制剂有限公司

【咨询电话】028-62808555



# 【产品批次/号】

具体批次/号以出厂批次/号为准；

# 【产品说明】

【Product】 KN95 Protective Respirator

【Model】 230×150mm

【Main Materials】 Non-woven fabric, melt-blown nonwoven fabric, hydrophilic non-woven fabric.

【Structure and composition】 This product consists of mask body, nose clip and mask band. The mask body uses a four-layer process, The outer layer and inner layer are made of non-woven fabric and hydrophilic non-woven fabric. The middle filter layer uses melt-blown nonwoven fabric and melt-blown cotton; The nose clip is plasticity; The mask band uses elastic material.

【Executive Standard】 GB 2626-2006

【Scope of Application】 Applicable to general population for daily use to protect against NON-OILY particles in the air, such as dust, smoke, fog, microorganism, PM2.5 and other particles.

【Instructions】

1. Take the folded mask out of the package.
2. Open the mask while nose clip pointing upwards.
3. Holding each side of the ear bands to fix the mask on the face to cover the mouth and nose.
4. Press the nose clip with your hand to fit the height and shape of the nose bridge.
5. Check the fitness between face and the edge of the mask.

【Matters For Attention】

1. If feel uncomfortable during wearing, stop using immediately.
2. This product is not suitable for using in extreme weather, escaping firefighting, special industries or other certain professions.
3. People allergic to non-woven fabrics DO NOT use.
4. DO NOT use if the package is damaged prior to use.
5. This product is not designed for wash. DO NOT use when odor, contamination, dampness, or discoloration occurred.

【Packing quantity】 2 pieces/pack.

【Storage Requirement】 Well-packed products shall be stored in a cool, dry, well-ventilated and clean room with a relative humidity of no more than 90%. The room shall be kept away from direct sunlight, fire and toxic and corrosive gases.

【Transportation】 The product should be sealed and should not be damaged, stained, or damp during transportation. Pay attention to avoid fire, rain, acid, alkali, and direct light.

【Expiry Date】 2 Year

【Date of production】 See outer packaging.

【Manufacturer】 Sichuan Pharmaceutical.Inc

【Address】 Sichuan Pharmaceutical.Inc No. 18 Baiye Road, Hi-Tech West Zone, Chengdu, Sichuan Province, China.

【Post code】 611731

【Contact Details】 +86(028)62808555

【Website】 <http://www.sczyzj.com>

【After-sales service company】 Sichuan Pharmaceutical.Inc





## 四川制药口罩对公款账户信息

账户名称：四川制药制剂有限公司

账 号：51001408537051501249

开 户 行：中国建设银行股份有限公司成都高新西区支行

行 号：105651005624

